

Oscimed SA
Fritz-Courvoisier 105
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
info@oscimed.com
+41 32 926 63 36

EC
Oscimed Europe SAS
441er Rue Denis Papin
FR 25200 Pontarlier
info@oscimed-europe.com

FR Centre d'emploi Mode de traitement positionnel

Instruccions d'utilisacion

Avertisements et consignes de sécurité

- Lire attentivement les consignes. Le non-respect des indications et des conditions d'usage mentionnées dans ce manuel peut compromettre la sécurité et l'efficacité du dispositif.
- Le fabricant et le distributeur ne peuvent pas être tenus responsables, si le dispositif a été utilisé, modifié, réparé ou/ou subi des interventions techniques non autorisées.

- Lisez ce manuel avant utilisation du produit.
- Veuillez conserver ce manuel avec l'appareil dont il fait partie intégrante. N'utilisez cet appareil que dans le cadre strict de l'utilisation prévue.
- En cas de fatigue diurne, vous souffrez peut-être d'épisodes du sommeil, veuillez consulter impérativement votre médecin pour un bilan complet.

Contenu :

- Un boîtier intelligent de traitement positionnel (A)
- Une ceinture de taille réglable (B)
- Deux piles 1,5 V alcalines de type AAA (C)
- Instructions d'utilisation (D)

Effets secondaires possibles:

- Perturbation du sommeil
- Douleurs dorsales
- Si des effets secondaires gênants persistent, cessez le port de l'orthèse et demandez un avis médical.

Installation de la ceinture :

- Évitez de toucher l'appareil avec les mains mouillées et évitez que l'appareil soit en contact avec des liquides.
- En cas de choc sur l'appareil avec apparition de fentes ou si l'appareil est cassé, cessez immédiatement l'utilisation et contactez votre distributeur.

Fonctionnement et utilisation :

- **Mise en fonction de l'appareil :** Pressez un court instant (moins d'une seconde) sur le bouton central de l'appareil. Deux courtes vibrations vous indiquent que le système est en fonction. Vous pouvez maintenant régler sereinement sur le côté ou sur le ventre. Si vous vous placez sur le dos après environ 10 à 15 secondes, le système vibre par intermittence jusqu'à ce que vous retrouvez une position latérale ou ventrale.
- **Arrêt de l'appareil :** Pressez le bouton de l'appareil durant 2 à 3 secondes. Une longue vibration vous indique que le système est arrêté.
- **Régulez l'intensité des vibrations de l'appareil :** L'appareil est réglé sur l'arrêt, pressez plus de 5 secondes sur le bouton central et maintenez votre pression. L'appareil peut alors passer de la transmission d'impulsions à une vibration continue et inversée se faisant sur le distributeur.
- En cas de non-respect de ces consignes, l'appareil se désactive et s'arrête.
- En cas de mauvais réglage, contactez le fabricant ou l'autorité compétente.

Consuls d'utilisation :

- Les premières nuits, les vibrations peuvent perturber votre sommeil et être perçues de façon gênante.
- Il est important de serrer suffisamment la ceinture, de manière à ce que la transmission des impulsions soit efficace.
- A contrario, un serrage insuffisant nécessitera un niveau de vibrations supérieur susceptible d'émettre plus de bruit et de perturber votre sommeil et celui de votre partenaire.

Comment vérifier l'efficacité de l'appareil ?

- Le plus simple est de noter les symptômes qui vous dérangent et de les noter sur le côté ou sur le ventre, et si vous ne souffrez pas pendant votre sommeil.
- En cas d'appnée du sommeil, une réduction de la fatigue diurne peut être un signe positif, toutefois, il est impératif de consulter le médecin pour les symptômes.

Comment vérifier que l'appareil est bien enclenché ?

- Lorsque le système est réglé/arrêté (environ toutes les 5 secondes), lorsque le système est enclenché, une pression courte sur le bouton central provoque une courte vibration.
- Note : Si le système est arrêté, la LED verte clignote brièvement toutes les 30 secondes.

Indicateur de niveau des piles



- Lorsque la LED rouge remplace la LED verte, il est recommandé de remplacer rapidement les piles. Si les piles ne sont chargées de temps, l'appareil ne démarre pas et émettra trois vibrations et trois signaux sonores successifs.

Arêt automatique

- Pour éviter de décharger des piles, l'appareil s'arrête automatiquement après environ 14 heures.

Remplacement des piles :

- Dévissez les deux vis qui se trouvent à l'arrière du boîtier. Retirez le fond du boîtier.
- Enlevez les piles usagées puis pressez quelque fois sur le bouton de réenclenchement. Insérez deux nouvelles piles 1,5 V de type AAA.
- A l'insertion des piles, le système vibre et la LED VERTE (piles

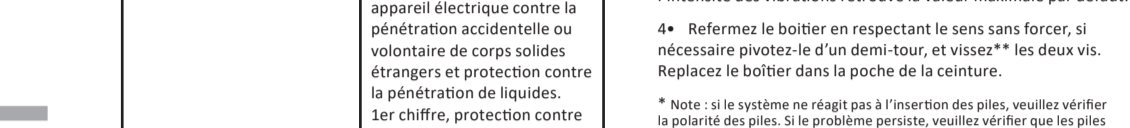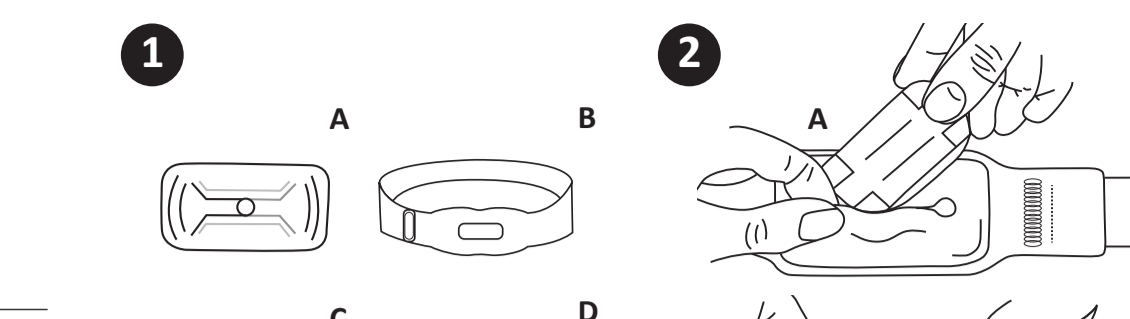

neuves) s'allument durant environ 1 seconde*. Le réglage de l'intensité des vibrations retourne la valeur maximale par défaut.

4. Référez le boîtier en respectant le sens sans force, si nécessaire pivotez le d'un demi-tour, et visitez** les deux vis. Replacez le boîtier dans la poche de la ceinture.

* Note : si le système ne réagit pas à l'insertion des piles, veuillez vérifier l'orientation des piles. Si le problème persiste, veuillez vérifier que les piles sont bien serrées et que les contacts sont protégés contre les corps solides supérieurs >2,5 mm.

Nettoyage et entretien de l'appareil :

- Nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide. Ne pas rincer sous l'eau. La ceinture en tissu peut être lavée à la main conformément à son étiquetage.

Conditions de garantie :

- L'appareil est garanti 2 ans si les consignes de sécurité sont respectées. Les piles et les dégrés d'usage pourraient causer un seul pas garantes.

Elimination en fin de vie du produit :

- En fin de vie de l'appareil, veuillez le présenter avec les autorités locales compétentes ou votre distributeur pour l'élimination des déchets.

Informations réglementaires sur la compatibilité électromagnétique

- Ce produit est conforme à la norme IEC 60601-1-2:2015 de compatibilité électromagnétique. Toutefois, certains matériels peuvent émettre de manière non intentionnelle des interférences RF susceptibles d'interférer avec l'appareil. Il est conseillé de l'éloigner de tout autre appareil électrique. (Selon chapitre 7.9.2.2 IEC 60601-1-2).

Contre-indications :

- Appareil formellement interdit au porteur de stimulateur cardiaque (pacemaker).

Effets secondaires possibles:

- Perturbation du sommeil
- Douleurs dorsales
- Si des effets secondaires gênants persistent, cessez le port de l'orthèse et demandez un avis médical.

Installation de la ceinture :

- Évitez de toucher l'appareil avec les mains mouillées et évitez que l'appareil soit en contact avec des liquides.
- En cas de choc sur l'appareil avec apparition de fentes ou si l'appareil est cassé, cessez immédiatement l'utilisation et contactez votre distributeur.

Fonctionnement et utilisation :

- **Mise en fonction de l'appareil :** Pressez un court instant (moins d'une seconde) sur le bouton central de l'appareil. Deux courtes vibrations vous indiquent que le système est en fonction. Vous pouvez maintenant régler sereinement sur le côté ou sur le ventre. Si vous vous placez sur le dos après environ 10 à 15 secondes, le système vibre par intermittence jusqu'à ce que vous retrouvez une position latérale ou ventrale.
- **Arrêt de l'appareil :** Pressez le bouton de l'appareil durant 2 à 3 secondes. Une longue vibration vous indique que le système est arrêté.
- **Régulez l'intensité des vibrations de l'appareil :** L'appareil est réglé sur l'arrêt, pressez plus de 5 secondes sur le bouton central et maintenez votre pression. L'appareil peut alors passer de la transmission d'impulsions à une vibration continue et inversée se faisant sur le distributeur.
- En cas de non-respect de ces consignes, l'appareil se désactive et s'arrête.
- En cas de mauvais réglage, contactez le fabricant ou l'autorité compétente.

Consuls d'utilisation :

- Les premières nuits, les vibrations peuvent perturber votre sommeil et être perçues de façon gênante.
- Il est important de serrer suffisamment la ceinture, de manière à ce que la transmission des impulsions soit efficace.
- A contrario, un serrage insuffisant nécessitera un niveau de vibrations supérieur susceptible d'émettre plus de bruit et de perturber votre sommeil et celui de votre partenaire.

Comment vérifier l'efficacité de l'appareil ?

- Le plus simple est de noter les symptômes qui vous dérangent et de les noter sur le côté ou sur le ventre, et si vous ne souffrez pas pendant votre sommeil.
- En cas d'appnée du sommeil, une réduction de la fatigue diurne peut être un signe positif, toutefois, il est impératif de consulter le médecin pour les symptômes.

Comment vérifier que l'appareil est bien enclenché ?




- Lorsque le système est réglé/arrêté (environ toutes les 5 secondes), lorsque le système est enclenché, une pression courte sur le bouton central provoque une courte vibration.
- Note : Si le système est arrêté, la LED verte clignote brièvement toutes les 30 secondes.

Indicateur de niveau des piles

- Lorsque la LED rouge remplace la LED verte, il est recommandé de remplacer rapidement les piles. Si les piles ne sont chargées de temps, l'appareil ne démarre pas et émettra trois vibrations et trois signaux sonores successifs.

Arêt automatique

- Pour éviter de décharger des piles, l'appareil s'arrête automatiquement après environ 14 heures.

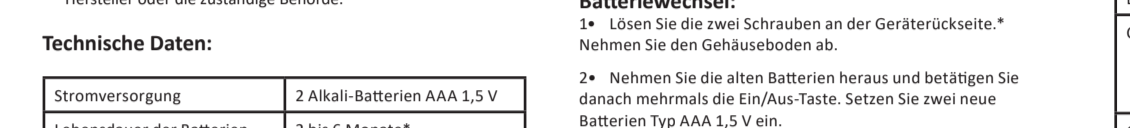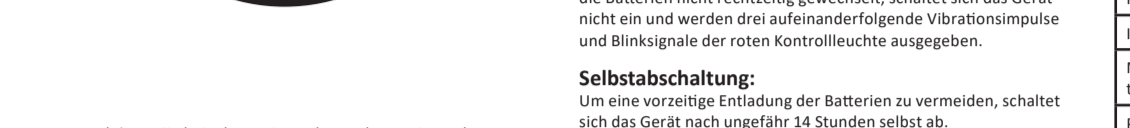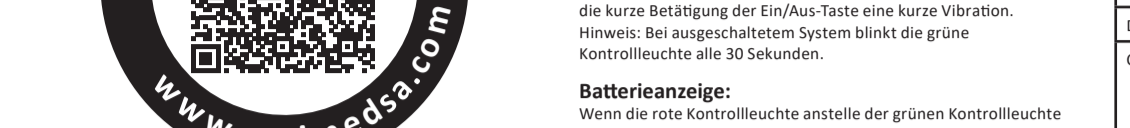

Wirksame des Geräts überprüfen:

- Die einfache Art und Weise, die Wirksamkeit des Geräts zu überprüfen, besteht darin, Ihren Betreuer zu fragen, ob Sie inzwischen in Seilen- oder Bauchlage schlafen und ob Sie während des Schlafs schnarchen.
- Bei Schlafapnoe kann eine verminderte Tagesmüdigkeit ein positiver Zeichen sein.
- Es ist jedoch in jedem Fall mit dem Arzt Rücksprache zu halten, um die Wirksamkeit der Therapie bestätigen zu können.

Ordungsgemäße Funktion des Geräts überprüfen:

- Die grüne Kontrollleuchte zeigt Ihnen den Betriebszustand (ungefähr alle 5 Sekunden). Bei eingeschaltetem System bewirkt die kurze Betätigung der Ein/Aus-Taste eine kurze Vibration. Wenn bei ausgeschaltetem System folgende Vibrationsmuster und Blinksignale der roten Kontrollleuchte ausgehen.

Batterieanzeige:

- Wenn die rote Kontrollleuchte anstelle der grünen Kontrollleuchte leuchtet, ist ein baldiger Batteriewechsel erforderlich. Werden die Batterien nicht rechtzeitig gewechselt, schaltet sich das Gerät nicht ein und werden drei aufeinanderfolgende Vibrationsmuster und Blinksignale der roten Kontrollleuchte ausgegeben.

Selbstabkühlung:

- Um eine vorzeitige Entladung der Batterien zu vermeiden, schaltet sich das Gerät nach ungefähr 14 Stunden selbst ab.

Technische Daten:

Stromversorgung	2 Alkali-Batterien AAA 1,5 V
Lebensdauer der Batterien	2 bis 6 Monate*
Klassifizierung	Medicinprodukt der Klasse I gemäss der EU-Vorschriften 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)
Vibrationsfunktion	Regulierbare Vibrationsstärke, 7 Stufen
Anzeigeelemente	Eine rote Kontrollleuchte und eine grüne Kontrollleuchte
Konfektionsgröße des Stützgerüts	Umfang 70 cm bis 125 cm
Abmessungen des elektronischen Geräts	75,5 x 37,5 x 14,5 mm**
Betriebsbedingungen	Raumtemperatur: 10 - 37 °C Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 % rF (kondensfrei)
Lager- und Transportbedingungen	Raumtemperatur: -20 - 50 °C Luftfeuchtigkeit: 0 - 80 % rF (kondensfrei)
Anwendingstyp	BF
IP30	Schutzgrad eines Geräts, das nicht gegen unabsichtigtes oder beabsichtigtes Eindringen von festen Fremdkörpern und Flüssigkeiten. 1. Kennziffer, Schutz gegen feste Fremdkörper: Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern mit einem Durchmesser > 2,5 mm. 2. Kennziffer, Schutz gegen Eindringen von Wasser: Kein Schutz

Warn- und Sicherheitshinweise:

- Bitte lesen Sie die Sicherheitsvorschriften durch. Die Nichtbeachtung der in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Anweisungen und der Warnhinweise kann die Sicherheit und die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen.
- Lesen Sie die Anweisungen und die Warnhinhalte in Fällen von Fehlhandlungen bzw. nicht bewilligten Modifikationen, Reparaturen und/oder technischen Eingriffen.
- Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verwendung des Produkts durch.
- Die Gebrauchsanleitung ist ein integraler Bestandteil des Geräts und sollte mit diesem zusammen aufbewahrt werden. Das Gerät darf nur in einem von den festgelegten bestimmungsgemässen Verwendung eingesetzt werden.
- Bei Tagesmüdigkeit leiden Sie möglicherweise an Schlafapnoe; lassen Sie sich in diesem Fall unbedingt eingehend von Ihrem Arzt untersuchen.
- Kontrollieren Sie beim Öffnen der Verpackung, dass das Gerät und insbesondere die Kunststoffteile unverändert sind.
- Verwenden Sie ausschließlich Alkali-Batterien in der in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Weise. Bitte entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Tragen Sie das Gerät auf Unter- bzw. Nachkleidung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Gegenwart von brennbaren Luft, Gasen, oxidierend- oder explosionsgefährlichen Gasen.
- Das Messgerät darf nicht in der Nähe von tragbaren oder mobilen HF-Kommunikationsgeräten (Mobiltelefone, Funkgeräte etc.) verwendet werden, da diese seinen Betrieb beeinträchtigen können.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassem Händen und achten Sie darauf, dass es nicht mit Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Stellen Sie bei Bruchschäden am Gerät oder bei Funktionsstörungen die Benutzung unverzüglich ein und kontaktieren Sie Ihren Händler.
- Die Benutzung des Geräts durch Kinder und/oder durch Menschen mit geistiger Behinderung darf nur unter strenger Aufsicht eines Erwachsenen im vollstündigen Sinnen geistigen Kräfte erfolgen.
- Reparaturen dürfen nur vom Reparaturservice des Herstellers oder einem vom Hersteller autorisierten Servicezentrum unter Verwendung von Original-Ersatzteilen ausgeführt werden. Die Selbstreparatur des Produkts ist ausdrücklich untersagt. Die Genehmigung des Herstellers vorzunehmen. Mit Ausnahme des Batteriewechsels sind keine elektrischen und/oder mechanischen Bauteile des Produkts konzipiert, um von Anwender repariert zu werden.
- Bei ausgeschalteter Ein/Aus-Taste mehr als 5 Sekunden niederdrücken. Das Gerät erzeugt Vibrations von unterschiedlicher Stärke. Lassen Sie die Taste los, sobald die Vibration die Ihnen angeordnete Stärke erreicht hat. Das Gerät hat eine Vibrationsstellung gespeichert. Es bleibt ausgeschaltet und ist startbereit.

Funktionsweise und Benutzung:

- **Gerät einschalten:** Drücken Sie 2 bis 3 Sekunden auf die Ein/Aus-Taste. Eine lange Vibration deutet die Ausschaltung des Geräts.
- **Vibrationsstärke regulieren:** Bei ausgeschalteter Ein/Aus-Taste mehr als 5 Sekunden niederdrücken. Das Gerät erzeugt Vibrations von unterschiedlicher Stärke. Lassen Sie die Taste los, sobald die Vibration die Ihnen angeordnete Stärke erreicht hat. Das Gerät hat eine Vibrationsstellung gespeichert. Es bleibt ausgeschaltet und ist startbereit.

Gebrauchsanleitung:

- In den ersten Nächten können die Vibrationen Ihren Schlaf stören. Es könnte eine Gewöhnungzeit von bis zu zwei Wochen erforderlich sein.
- Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Temperaturbereiche.
- Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und suchen Sie einen Facharzt auf, wenn Sie Überempfindlichkeit oder allergische Reaktionen gegenüber den Materialien des Geräts aufweisen. Bitte informieren Sie den Hersteller oder Händler.

substitutione delle pile, l'utente (il paziente) è considerato essere un operatore destinato all'uso dell'apparato.

Spagnimento automatico:

- Per evitare che le pile si scarichino, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo circa 14 ore.

Sostituzione delle pile:

- 1- Svitare le due viti che si trovano nella parte posteriore del dispositivo. Togliere il coperchio.
- 2- Togliere le pile scariche, quindi premere più volte sul pulsante di accensione. Inserire due pile nuove 1,5 V di tipo AAA.

Una volta inserite le pile, il sistema vibra e la LED VERDE (pila nuova) si accende per circa 3 secondi*. La regolazione dell'intensità delle vibrazioni viene reimpostata per default sul livello massimo.

- 4- Richiedere opportunamente il dispositivo senza forzare; se necessario, consultare il coperto di questo manuale o il proprio medico.
- 5- Inserire nuovamente il dispositivo all'interno della fascia tenuta sul collo.

Pulizia e manutenzione dell'apparecchio:

- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido. Non lavare sotto acqua corrente. La cintura in tessuto deve essere lavata a mano secondo quanto specificato sull'etichetta.

Condicioni di garanzia:

- L'apparecchio è garantito 2 anni, a condizione che vengono rispettate le norme di sicurezza. La garanzia non copre le pile e gli eventuali danni da questo causati.

Eliminazione e messa fuori uso del prodotto:

- Quando l'apparecchio non è più in uso, riporlo nel suo auricolare componenti o il proprio distributore per lo smaltimento del rifiuto.

Informazioni normative sulla sicurezza elettrica

- Classe del dispositivo: I
- Norma applicata: IEC 60601-1:2005 + A1:2012
- Parte applicata: BF
- Sterilizzazione: No

Informazioni normative sulla compatibilità elettromagnetica

- Classificazione e progettato in conformità alla norma IEC 60601-1-2:2015 per la compatibilità elettromagnetica; tuttavia, alcuni materiali possono emettere accidentalmente radiazioni radiofrequenza che interferiscono con l'apparecchio. Si consiglia di allontanare questi ultimi da qualsiasi altro apparecchio elettrico (ai sensi del capitolo 7.9.2.2 della norma IEC 60601-1-2).

Contenido della confezione:

- Un dispositivo intelligente per la terapia posizionale (A)
- Una cintura regolabile (B)
- Due pile alcaline 1,5 V di tipo AAA (C)
- Istruzioni per l'uso (D)

Indicazioni:

- Permette la terapia posizionale del russamento / dell'apnea quando si dorme sulla schiena. L'apparecchio emette una vibrazione quando si assume la posizione errata che favorisce il russamento/ l'apnea, indicando che occorre girarsi sul fianco o sulla pancia.

Controindicazioni:

- Apparecchio formalmente vietato ai pazienti portatori di stimolatore cardiaco (pacemaker).
- Dolori dorsali
- In caso di persistenza di effetti collaterali fastidiosi, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e richiedere un parere medico.

Possibili effetti collaterali

- Disturbo del sonno
- Dolori dorsali

Regolazione dell'intensità delle vibrazioni:

- In caso di persistenza di effetti collaterali fastidiosi, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e richiedere un parere medico.

Installazione della cintura:

- Rimuovere la protezione delle pile tirando la linguetta rossa.
- Inserire il dispositivo elettronico nella tasca della cintura.
- Regolare la cintura sul torace tirando leggermente. (Figura B).

Funzionamento e utilizzo:

- **Messa in funzione dell'apparecchio:** Premere per un breve istante (meno di 5 secondi) il pulsante centrale dell'apparecchio. Due vibrazioni brevi indicano che il sistema è in funzione. A questo punto, coricarsi tranquillamente sul fianco o sulla pancia. Se ci si gira sulla schiena, dopo circa 10-15 secondi, il sistema vibra a intensità moderata o alta, indicando che il sistema si muove nuovamente sul fianco o sulla pancia.

Consigli per l'uso:

- Durante le prime notti di utilizzo, le vibrazioni prodotte dal dispositivo potrebbero disturbare il sonno. È normale prevedere quindi un periodo di adattamento compreso tra una e due settimane.
- Per far funzionare l'apparecchio, indossare la biancheria intima o i pigiama, togliere le pile dall'apparecchio.
- Quando l'apparecchio si accende, inserirvi immediatamente una mano nella tasca della cintura e premere il pulsante dell'apparecchio. Il sistema vibra e la LED VERDE (pila nuova) si accende per circa 3 secondi. La regolazione dell'intensità delle vibrazioni viene reimpostata per default sul livello massimo.
- Richiedere opportunamente il dispositivo senza forzare; se necessario, consultare il coperto di questo manuale o il proprio medico.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido. Non lavare sotto acqua corrente. La cintura in tessuto deve essere lavata a mano secondo quanto specificato sull'etichetta.
- Quando l'apparecchio non è più in uso, riporlo nel suo auricolare componenti o il proprio distributore per lo smaltimento del rifiuto.

Como verificar a eficiência do aparelho?

- O método mais simples é verificar diretamente no aparelho se o sistema está funcionando.
- Quando o aparelho estiver desligado, pressione o botão central por alguns segundos. Se o aparelho estiver desligado, duas vibrações curtas indicam que o sistema está ligado. O aparelho está pronto para ser usado, pode deixar-se calmamente de lado ou de bruços. Se estiver detectado de costas após cerca de 10 a 15 segundos, o sistema vibra com intensidade moderada ou alta, indicando que o sistema se move novamente para o lado ou de bruços.

Como verificar se o aparelho se encontra no modo de funcionamento correto?

- Quando o aparelho estiver desligado, pressione o botão central por alguns segundos. Se o aparelho estiver desligado, duas vibrações curtas indicam que o sistema está ligado. O aparelho está pronto para ser usado, pode deixar-se calmamente de lado ou de bruços. Se estiver detectado de costas após cerca de 10 a 15 segundos, o sistema vibra com intensidade moderada ou alta, indicando que o sistema se move novamente para o lado ou de bruços.

Como verificar se o aparelho está bem ligado?

- Quando o aparelho estiver desligado, pressione o botão central por alguns segundos. Se o aparelho estiver desligado, duas vibrações curtas indicam que o sistema está ligado. O aparelho está pronto para ser usado, pode deixar-se calmamente de lado ou de bruços. Se estiver detectado de costas após cerca de 10 a 15 segundos, o sistema vibra com intensidade moderada ou alta, indicando que o sistema se move novamente para o lado ou de bruços.

Como verificar se o aparelho está bem ligado?

- Quando o aparelho estiver desligado, pressione o botão central por alguns segundos. Se o aparelho estiver desligado, duas vibrações curtas indicam que o sistema está ligado. O aparelho está pronto para ser usado, pode deixar-se calmamente de lado ou de bruços. Se estiver detectado de costas após cerca de 10 a 15 segundos, o sistema vibra com intensidade moderada ou alta, indicando que o sistema se move novamente para o lado ou de bruços.

tempestivamente, l'apparecchio non si ricaccenderà ed emetterà tre vibrazioni, mentre il LED rosso lampeggerà tre volte.

Spagnimento automatico:

- Per evitare che le pile si scarichino, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo circa 14 ore.

Sostituzione delle pile:

- 1- Svitare le due viti che si trovano nella parte posteriore del dispositivo. Togliere il coperchio.
- 2- Togliere le pile scariche, quindi premere più volte sul pulsante di accensione. Inserire due pile nuove 1,5 V di tipo AAA.

Una volta inserite le pile, il sistema vibra e la LED VERDE (pila nuova) si accende per circa 3 secondi*. La regolazione dell'intensità delle vibrazioni viene reimpostata per default sul livello massimo.

- 4- Richiedere opportunamente il dispositivo senza forzare; se necessario, consultare il coperto di questo manuale o il proprio medico.
- 5- Inserire nuovamente il dispositivo all'interno della fascia tenuta sul collo.

Pulizia e manutenzione dell'apparecchio:

- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido. Non lavare sotto acqua corrente. La cintura in tessuto deve essere lavata a mano secondo quanto specificato sull'etichetta.

Condicioni di garanzia:

- L'apparecchio è garantito 2 anni, a condizione che vengono rispettate le norme di sicurezza. La garanzia non copre le pile e gli eventuali danni da questo causati.

Eliminazione e messa fuori uso del prodotto:

- Quando l'apparecchio non è più in uso, riporlo nel suo auricolare componenti o il proprio distributore per lo smaltimento del rifiuto.

Informazioni normative sulla sicurezza elettrica

- Classe del dispositivo: I
- Norma applicata: IEC 60601-1:2005 + A1:2012
- Parte applicata: BF
- Sterilizzazione: No

Informazioni normative sulla compatibilità elettromagnetica

- Classificazione e progettato in conformità alla norma IEC 60601-1-2:2015 per la compatibilità elettromagnetica; tuttavia, alcuni materiali possono emettere accidentalmente radiazioni radiofrequenza che interferiscono con l'apparecchio. Si consiglia di allontanare questi ultimi da qualsiasi altro apparecchio elettrico (ai sensi del capitolo 7.9.2.2 della norma IEC 60601-1-2).

Contenido della confezione:

- Un dispositivo intelligente per la terapia posizionale (A)
- Una cintura regolabile (B)
- Due pile alcaline 1,5 V di tipo AAA (C)
- Istruzioni per l'uso (D)

Indicazioni: